



Manual Usuario

Pesa inteligente
BS-100



Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso correcto de este producto.

Advertencia

Si usted tiene un marcapasos o se encuentra embarazada, por favor no utilice este producto.

Instrucciones importantes

- El resultado es solo para referencia no reemplaza el consejo médico profesional.

Notas durante la medición.

- Coloque la balanza en una superficie plana y dura. Superficies suaves tales como alfombra afectarán el rendimiento de la balanza.

- Evite la medición inmediatamente después de hacer ejercicio extenuante, sauna o baño y tras comer o beber.

- La condición de la piel en la parte inferior de sus pies puede afectar la lectura. Los efectos naturales del envejecimiento o la actividad pueden endurecer la piel. Tome la lectura con los pies limpios y ligeramente húmedos para una mejor precisión.

Montenimiento

- Utilice un paño suave y seco para limpiar el polvo.

- NO utilice paños húmedos para limpiar la suciedad.

- NO lave el dispositivo con agua ni lo sumerja.


- NO desmonte este dispositivo. Si el dispositivo presenta problemas, por favor, póngase en contacto con el vendedor.

Instalar la aplicación

1. Instale la aplicación gratuita "TuyaSmart", que está disponible en la App Store y Google Play.
2. Registre una cuenta.
3. Luego empareje su balanza con su teléfono inteligente siguiendo los pasos indicados en la aplicación.

CONFIGURAR LA CONTRASEÑA DE WI-FI

1. Seleccione "+" y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción "Empezar a escanear". Confirme que la balanza esté en modo pareo.
2. Mantenga presionado el botón en la parte posterior de la balanza y la pantalla se verá como a continuación:

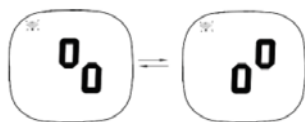

3. Con éxito, la balanza se mostrará []. De lo contrario, la balanza se mostrará Conf.



COMENZAR LA MEDICIÓN

Mídase con los pies descalzos, siga la siguiente demostración.



Correcto



Incorrecto

PASO 1: Pise la plataforma con los pies descalzos.

PASO 2: Quéedese quieto y mantenga completamente el contacto con los electrodos hasta que el LCD deje de mostrar “0000”











PASO 3: Asegúrese de que su WiFi esté encendido. Los resultados se enviarán a la aplicación de su teléfono.



PASO 4: Configure su información personal en la aplicación y haga clic en el último registro de medición para distribuir su ID de usuario.

Nota: También podrá hacer clic en “Configuración” para activar “distribuir automáticamente”. A continuación, los datos serán automáticamente asignados de acuerdo a la desviación de peso de su cuerpo (dentro de +/- 2 kg). Éste es un esquema de asignación con modalidades automática y manual.

Explicación de los íconos

-  Batería baja necesita cambiar la batería
-  El peso de sobrecarga es mayor que 180 kg.
-  Ícono WIFI
-  Datos no enviados
-  Conectado exitosamente a WiFi
-  Falla de conexión
-  Error
-  Medida inestable

Para que dos o más usuarios puedan utilizar la pesa, debe seleccionar Yo > Gestión del hogar > Añadir familiares e ingresar los datos del familiar. (En rol de familia, debe seleccionar "Miembro común" o "Administrador", este último podrá hacer modificaciones en la aplicación).

Cada vez que se pese algún miembro, al ingresar en la aplicación y seleccionando la balanza, aparecerán datos a reclamar. Reclámelos y así podrá guardar sus datos en su usuario.

SELECCIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA

Luego, de conectar vía Wi-Fi, podrá elegir la unidad de medida presionando el botón trasero de pesa. Podrá elegir entre kg, lb y st.

Especificaciones principales

Nombre	Pesa inteligente BS-100
Modelo	BS-100
Pantalla	LCD
Unidad	kg / lb / st
Rango de medición	5.0-180.0kg
Modo de conexión	App Tuya Smart
Alimentación	3 x batería AAA
Temperatura de trabajo	-5 ~ 40 °C

Solución de problemas

Al medir...

Problema	Causa	Solución
Resultados de medición anormales: - Demasiado alto - Demasiado baja - Gran diferencia entre dos medidas recientes.	Postura incorrecta	Pise descalzo la plataforma y quédese quieto
	El dispositivo está ubicado en suelo blando, como alfombra o superficie resistente.	Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y dura.
	Cuerpo frío, que puede resultar en mala circulación sanguínea.	Caliente sus manos y pies para mejorar la circulación sanguínea y luego vuelva a medir.
	Electrodos fríos.	Coloque el dispositivo en una habitación tibia durante un tiempo y luego vuelva a medir.
	Sus pies están demasiado secos.	Limpie sus pies con un paño húmedo, manteniéndolos ligeramente húmedos al comenzar la medición.

PESA INTELIGENTE BS-100 / MANUAL DE USUARIO

No se muestra nada en la pantalla LCD cuando el dispositivo se enciende.	Baterías aún no instaladas.	Instale las baterías. (Por favor refiérase a Insertar la Baterías)
	Baterías gastadas.	Reemplace las tres baterías al mismo tiempo. Por favor, compre baterías autorizadas para su reemplazo.
No se puede proceder a analizar el IMC, la grasa corporal, el agua corporal total, la masa muscular y la masa ósea.	Se subió a la plataforma con calcetines o zapatos.	Por favor, mantenga los pies descalzos durante la medición y mantenga completamente el contacto con los electrodos.
	El usuario no puede seleccionar su ID de la lista del sistema.	Por favor, asigne una ID de usuario.
El dispositivo se apaga automáticamente.	Baterías gastadas.	Reemplace las tres baterías al mismo tiempo. Por favor, compre baterías autorizadas para su reemplazo.
La transmisión de datos no se lleva a cabo.	WiFi está apagado.	Encienda el WiFi.
	La aplicación está desactivada.	Presione el ícono para encender su aplicación.
	Fuera del alcance de la transmisión de Wi-Fi.	Coloque su teléfono inteligente más cerca de la balanza.
	Ninguno de los ID de usuario está asignado.	Por favor, asigne una ID de usuario.

